



ADIAVET™ ASFV Fast Time

NEW

BIO-X ADIAGENE a le plaisir de vous annoncer la disponibilité du **NOUVEAU KIT PCR** temps réel pour la détection du virus de LA **PESTE PORCINE AFRICAINE (AFRICAN SWINE FEVER VIRUS)**.

- Conforme aux exigences du LNR et à la norme NF U47-600
- Prêt à l'emploi
- Stable à <-15°C, 18 mois
- Programmes PCR rapides (1h ou 1h15)
- Aide à l'adoption de méthode : **Témoin LD_{PCR}** (fourni par ADIAGENE) et **Souche ASFV** (fournie par le LNR)
- Echantillons : **Sang, sérum, culture cellulaire, rate, amygdale, ganglion, écouvillon**
- Extraction ADN/ARN : **colonnes de silice et billes magnétiques**



Diagnostic différentiel possible entre la Peste Porcine Africaine et la Peste Porcine Classique à partir d'un même prélèvement :

échantillon




extraction ADN/ARN commune



programme PCR commun



Ech. n°1
Ech. n°2
Ech. n°3

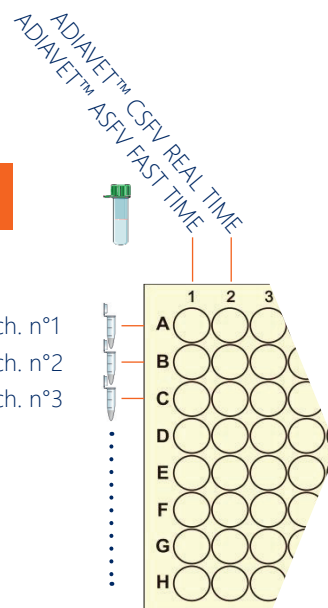

Code	Désignation	Nb. de réactions
ADI551-50	ADIAVET™ ASFV FAST TIME	50
ADI551-100	ADIAVET™ ASFV FAST TIME	100
ADI223-100	ADIAVET™ CSFV REAL TIME	100
NADI001	ADIAMAG™ Plus (kit extraction en billes magnétiques)	200
MN740385	RL1 BUFFER (pour les tissus seulement)	125 ml

Nous contacter :

> **QUESTIONS TECHNIQUES** Béatrice Blanchard ✉ beatrice.blanchard@adiagene.fr ☎ 02 96 68 40 20

> **QUESTIONS COMMERCIALES** Emeraude Hadj-attou ✉ e.hadjattou@biox.com ☎ 07 86 89 12 93



Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2015
certified to assure the best to its customers

www.biox.com

ADIAGENE

rue Gabriel Calloët-Kerbrat, n°9
22440 PLOUFRAGAN – France
Tel.: +33 (0)2 96 68 40 20

Bio-X DIAGNOSTICS S.A.

rue de la Calestienne, n°38
5580 ROCHEFORT - Belgique
Tel.: +32 (0) 84 32 23 77